



Dr G. Dugaz - Dr C. Filliol - Dr I. Gaildraud - Dr N. Jaillais -
Dr O. Moreau - Y. Poirier - JL. Prouteau - D. Przyrowski -
P. Renesme - Dr A. Touzalin

Mois : Avril Année : 2014

Bulletin N°11

Information préalable au changement de notre système d'immuno-analyse :
Arrivée d'un système ARCHITECT de la société ABBOTT
à partir du 22 avril 2014
en remplacement du système ROCHE MODULAR en place jusqu'à présent

Remarque générale préalable : la transition vers de nouvelles trousse de dosage (changement de couple antigène-anticorps) peut s'accompagner de modifications notables de valeurs de référence à prendre en compte pour la comparaison avec les résultats antérieurs sur un certain nombre de paramètres (sérologies, marqueurs tumoraux, ...)

A. Modifications importantes +++ :

⇒ A savoir, changement de nature de la molécule dosée pour :

a) PEPTIDE NATRIURETIQUE : passage du NT proBNP au BNP

Conséquences pratiques :

- dosage sur plasma EDTA exclusivement
- conservation à température ambiante < 4h, **donc privilégier les prélèvements sur place au laboratoire.**
- changement de valeurs de référence :

Seuil recommandé < 100 pg/ml

Pour information complémentaire, se référer aux tableaux ci-après :

Population sans insuffisance cardiaque (résultats au 95ème percentile)					
Tranches d'âge (ans)	<46	46-54	55-64	65-74	>75
BNP en pg/ml	85	87	119	160	254

Population avec insuffisance cardiaque selon les 4 catégories de la New York Heart Association (I à IV)				
Classes NYHA	I	II	III	IV
BNP en pg/ml Homme	1281	1356	2288	3654
BNP en pg/ml Femme	1022	2031	2718	>4000

b) TROPONINE : passage de la Troponine T à la Troponine I cardiaque hypersensible

Valeurs attendues dans une population d'individus apparemment sains, au 99^{ème} percentile

Femme < 15,6 pg/ml

Homme < 34,2 pg/ml

B. Variations importantes des valeurs de référence:

a) Anticorps de classe IgG anti Toxoplasmiques :

IgG anti Toxoplasmiques	
IgG < 1.6 UI/mL	Absence d'anticorps
1.6 < IgG < 3.0 UI/mL	Zone grise, statut indéterminé, A contrôler dans 15 jours
IgG > 3.0 UI/mL	Présence d'anticorps

b) Anticorps anti-thyroïdiens :

- IgG anti thyroperoxydase (TPO) < 5.6 UI/mL
- IgG anti thyroglobuline (ATG) < 4.1 UI/mL

NB : Pour tous les autres paramètres (biochimie comprise), veuillez vous référer aux nouvelles valeurs de référence indiquées sur les comptes-rendus d'analyse de vos patients.


Bilan de l'enquête de satisfaction 2013

Sur 400 questionnaires distribués, le laboratoire a recueilli 111 réponses (70 généralistes et 17 spécialistes) soit 27.8% de participation.

On note 82% de prescripteurs satisfaits à très satisfaits et 4% de prescripteurs peu à pas satisfaits.

La direction a bien noté la persistance d'une demande d'amélioration concernant les transmissions Hprim net ou Apicrypt.

Les biologistes vous invitent à les contacter pour tout problème de communication par serveur, pour une aide à l'interprétation des résultats, pour toute question concernant des nouvelles analyses ou pour tout sujet que vous voudriez voir développé dans notre bulletin d'information.

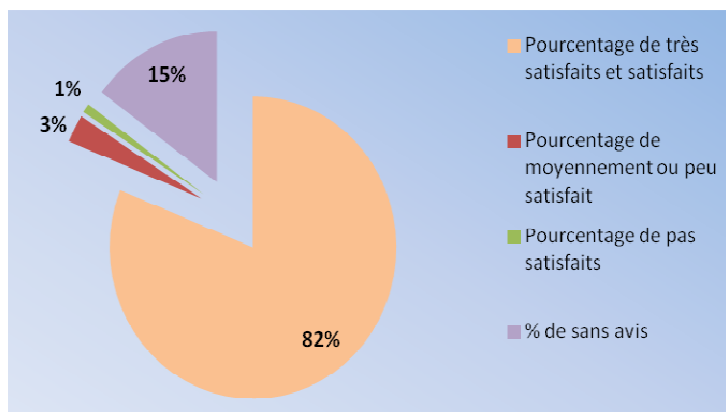

Les biologistes vous remercient pour votre participation à cette enquête qui a pour but d'améliorer la qualité de l'accueil, des analyses, du rendu des résultats, de la relation biologistes prescripteurs.

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter notre site Internet, <http://www.bioatlantique.fr>, sur lequel vous trouverez toutes informations utiles, prestations disponibles au laboratoire, contacts, procédure de réclamation. Vous y trouverez également un espace dédié aux professionnels de santé, rubrique « Accès professionnel » où sont disponibles : le manuel de prélèvement, ses mises à jour et nos différents bulletins d'information ainsi qu'un espace permettant la consultation de résultats par serveur sécurisé, rubrique « Accès résultats patients & médecin ».